

BEBBE

AR 863 KULAKTAN
VE ALINDAN ATEŞ
ÖLÇER DİJİTAL
THERMOMÈTRE

AR 863 EAR AND
FOREHEAD DIGITAL
THERMOMETER

AR 863 DIGITAL-
THERMOMETER ZUR
FIEBERMESSUNG
AM OHR UND
VON DER STIRN

arZUM[®]

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



3 V

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

3YEARS
ARZUM WARRANTY

3JAHRE
ARZUM GARANTIE

arZUM
Bebbe

BEBBE


AR 863 KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL TERMOMETRE

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Başlama düğmesi | A) Düşük pil göstergesi |
| 2. LCD ekran | B) Yıl göstergesi / Hafıza göstergesi |
| 3. Isı LED göstergesi | C) Tarih göstergesi |
| 4. Kızılötesi termometre sensörü | D) Isı göstergesi |
| 5. Alından ateş ölçmek için başlık | E) Ölçüm durum göstergesi |
| 6. OK düğmesi | F) Yemek ısı ölçme göstergesi |
| 7. Ayarlama düğmesi | G) Alından ateş ölçme göstergesi |
| 8. Pil bölümü | H) Kulaktan ateş ölçme göstergesi |

Doğru ölçümler sağlamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bu termometrenin doğru ölçüm yapabilmesi için gereken ortam sıcaklığı 16-40°C (61-104°F).
- Cihazınızı sıcaklık alt ve üst sınırları dışındaki ortamlarda (20°C (68°F) altı veya 50°C (122°F) üstü) ve yüksek nem oranında (≥95%RH) bulundurmayınız.
- Bu ürün sadece evde kullanılmak için üretilmiştir. Cihaz ticari ve klinik amaçlarla kullanılamaz. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Çocukların güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadan ürünü tek başlarına kullanmalarına izin vermeyiniz. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Bu cihazın kullanımı, doktorunuzun tavsiyelerini değiştirmek için önerilmemektedir.
- Şüphelendiğiniz herhangi bir durumda doktorunuzla temasa geçiniz (Özellikle tedavi görüyor ya da ilaç kullanıyorsanız).
- Termometrenizi direkt güneş ışığı altında veya çok sıcak ortamlarda tutmayınız. Soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ürün sadece insanlarda kulaktan ve alından temasla ateş ölçmek için imal edilmiştir.
- Sensör ısınmasından dolayı ölçme hassasiyeti olumsuz etkilenebileceğinden, lütfen ürününüzü sensör ucundan tutmayınız.
- Ölçme hassasiyeti egzersiz yapılması, soğuk veya sıcak bir şeyler içilmesi gibi birçok faktörden etkilenebilir.

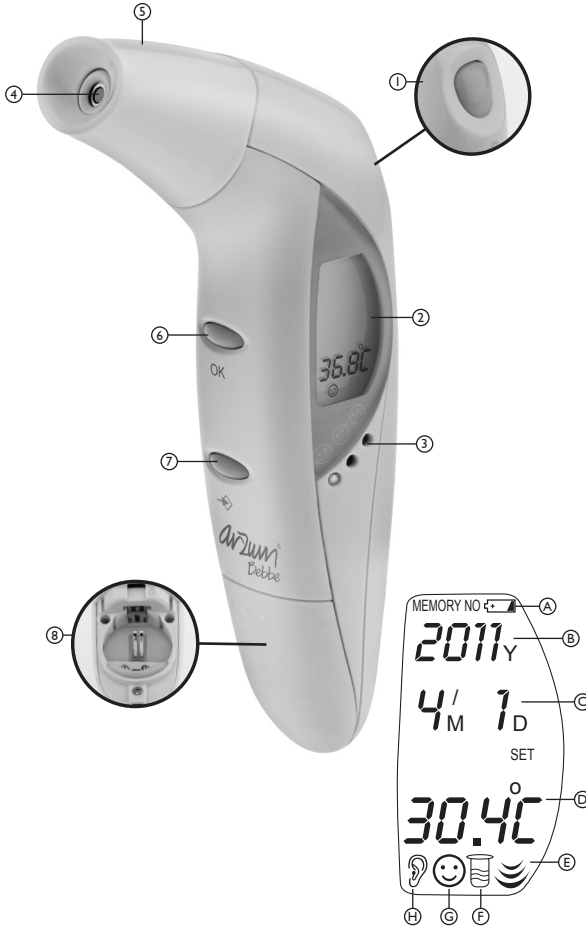

• Farklı termometrelerle ölçülen sıcaklıklar birbiriyle karşılaştırılmaz. Bu nedenle kendiniz vücut ateşi ölçtüğünüzde, vücut sıcaklığını hangi termometre(alın termometresi, kulak termometresi v.b.) ile vücudun hangi yerinde ölçtüğünüzü dikkate alınız veya doktorunuza bu bilgiyi aktarınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

Arzum Bebbe Ateş Ölçer Digital Termometre Ölçüm Prensipleri

• Arzum Bebbe Ateş Ölçer Digital Termometre, kulak zarı ve etrafındaki dokuda odaklanan ısıyı ölçer. Doğruluk seviyesini arttırmak için, beden sıcaklığı anında bir saniye içinde 12 kere ölçülmektedir ve LCD ekranı üzerinde en yüksek sıcaklık görüntülenmektedir.

Neden kulaktan ateş ölçme?

Ateş ölçmenin esas amacı, vücudun ateşini ve hayati önem taşıyan organlarımızın sıcaklığını ölçmektir. Kulaktan ölçülen ateş, vücudun iç sıcaklığını en doğru şekilde yansıtır. Çünkü kulak zarı, kanı, beyindeki ısı kontrol merkezi ile beraber aynı damardan sağlar. Bu nedenle, vücut sıcaklığında meydana gelen değişiklikler; kulaktan, vücudunun diğer kısımlarına oranla, daha kısa zamanda ve daha doğru bir şekilde saptanabilir.

Vücut Sıcaklığı

Normal vücut sıcaklığı bir değer aralığıdır. Normal sıcaklık değer aralıkları kişiden kişiye değişebildiği gibi, gün içerisinde de değişiklik gösterir. Bu yüzden kendinizin ve diğer aile bireylerinin normal sıcaklık değer aralıklarını belirlemeniz önemlidir.

Vücut bölgelerine göre normal değerler:

Koltuk altı	: 34.7 - 37.7°C (94.5 - 99.8°F)
Ağız yoluyla	: 35.5 - 37.5°C (95.9 - 99.5°F)
Rektal	: 36.6 - 38.0°C (97.9 - 100.4°F)
Kulaktan	: 35.8 - 38.0°C (96.4 - 100.4°F)

Yaşa göre normal sıcaklık değer aralıkları:

0 - 2 yaş	: 36.4 - 38.0°C (97.5 - 100.4°F)
3 - 10 yaş	: 36.1 - 37.8°C (97.0 - 100.0°F)
11 - 65 yaş	: 35.9 - 37.6°C (96.6 - 99.7°F)
65 yaş üstü	: 35.8 - 37.5°C (96.4 - 99.5°F)

Çoklu Kullanım (Geniş Ölçüm Aralığı)

• **Arzum Bebbe Ateş Ölçer Digital Termometre** 32°C (89.6°F) - 42.9°C (109.3°F) geniş bir ölçüm aralığına sahiptir. Bu sayede yalnızca vücut sıcaklığını ölçmekle kalmaz aşağıdaki ölçümleri de yapar:

- Vücut sıcaklığı: 32 - 42.2°C (89.6 - 107.9°F)

- Süt yüzeyi ısısı

Biberon 38 - 45°C (100.4 - 113°F)

- Bebek banyosunun yüzey ısısı

Bebegin banyosu 24 - 27°C (75.2 - 80.6°F)

Banyo suyu 38 - 40°C (100.4 - 104°F)

Ölçüm Aralığı: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.3°F)

Oda Sıcaklığı: 5.0°C - 59.9°C (41.0°F - 139.8°F)

Ölçme Doğruluğu: +/-0.2°C (veya +/-0.4°F)

35.5°C ~ 42.0°C (veya 95.9°F ~ 107.6°F)

Diğer aralıklar için: +/-0.3°C (veya +/-0.5°F)

Oda Sıcaklığı: +/-1°C (2°F)

ARZUM BEBBE KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL TERMOMETRE'NİN KULLANIMI

Kulaktan Ateş Ölçme:

- Alından ateş ölçme başlığını (5) cihazınızdan çıkartınız.
- Başlama düğmesine (1) basınız.



Ateş ölçmeden önce:

- 1 yaşından küçük çocuklar için: Kulağı aşağı çekerek arkaya doğru hafifçe geriniz.
- 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için: Kulağı yukarı çekerek arkaya doğru hafifçe geriniz.
- Düz hat üzerinde kulak zarına bakacak şekilde cihazınızı yerleştiriniz.
- Başlama düğmesine (1) basınız. Kısa "Bip" sesi duyacaksınız.
- İki defa bip sesi duyduğunuz zaman ölçüm yapılmış demektir.


- Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra ölçüm sonucunu sesli duyacaksınız.

NOT: Aşağıdaki durumlar altında, ölçümü üç kere tekrarlayınız.

- 90 günlük bebekten küçük olması durumunda.
- 3 yaşından küçük çocuğun ölçümünün ortalama beden sıcaklığının dışında olması halinde.
- Sondanın yanlış kullanıldığında.

Alından Ateş Ölçme:

- Alından ateş ölçer başlığını (5) takınız.
- Cihazınızı dik konumda alnızının ortasına hafifçe tutunuz.
- Başlama düğmesine (1) basınız. Kısa "Bip" sesi duyacaksınız.
- İki defa bip sesi duyduğunuz zaman ölçüm yapılmış demektir.
- Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra ölçüm sonucunu sesli duyacaksınız.
- Ölçme işlemi bittikten sonra, otomatik olarak ekranda tarih göstergesi görünecektir.
- 3 dakika tarih göstergesi modunda durduktan sonra cihazınız otomatik olarak kapanacaktır.

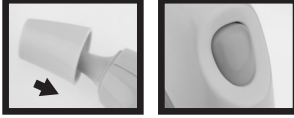

Konuşma dili değiştirme uyarı

- Cihazınız Türkçe ayarlıdır. Ekran zaman modunda iken OK düğmesine (6) 2 saniye basılı tutunuz. Böylece sesi İngilizce, Almanca ya da sessiz konuma getirebilirsiniz.

ISI LED GÖSTERGESİ

Ölçüm yaptığınız sonuç LCD ekran üzerinde görüntüledikten sonra, ısı ile ilgili LED ışığı yanacaktır:

- Yeşil ışık : 35,6 - 37,2°C (96 - 99°F)
- Turuncu ışık: 37,3 - 37,5°C (99,1 - 99,5°F)
- Kırmızı ışık : 37,6 - 42,9°C (99,7 - 109,3°F)

UYARI:

- Sondanın yanlış kullanımı yanlış ölçüme yol açabilecektir.
- Sağ ve sol kulak arasındaki sıcaklık farklılık gösterebilir. Bu yüzden, daima aynı kulaktan ölçüm yapmaya dikkat ediniz.

- Doğru ölçümü sağlayabilmek için, kulağın her türlü kir veya tıkanıklıktan arındırılmış olması gerekmektedir.

- Ölçüm, düşük pil  ile yapıldığı zaman yanlış çıkabilecektir. Bu durumda pili değiştiriniz.
- Su veya benzeri bir şey ölçtüğünüz zaman, mümkün olduğunca cihazınızı yakın olarak ölçünüz (Suya bastırmayınız).
- Arzum Bebe Ateş Ölçeri ateş veya benzeri bir şey ölçmek için kullanmayınız.

HAFIZA ÖZELLİĞİ

- Cihazınız toplam son 30 ölçümü hafızasında saklar.
- Ayarlama düğmesine (7) basılması son ölçümü gösterecektir.
- Ayarlama düğmesine (7) devamlı basılması son 30 ölçüm sonucunu gösterecektir.
- Her bir ölçüm sonucu hafıza numarası ve ölçüm tarihi ile görüntülenir.

PİL DEĞİŞİMİ

- Cihazınız bir adet lityum pil ile beraber satılmaktadır. LCD ekranında  sembolü belirlediği zaman, aşağıdaki aşamaları izleyerek pili değiştiriniz:



- Sürgülü pil kapağını bastırarak ileriye itiniz ve kapağı açınız.

- "+" işareti yukarıda kalacak şekilde yeni pili yerleştiriniz.

Not: Çevre kirliliğini önlemek için kullanılmış pili yeniden dönüştürünüz.

- 1 adet pil ile yaklaşık 6000 ölçüm yapılabilir.

HATA GÖSTERGELERİ

- "H1" : Ölçülen yer 42,9°C / 109,3°F sıcaklığın üzerinde ise hata verir.
- "Lo" : Ölçülen yer 32°C / 89,6°F sıcaklığın altında ise hata verir.
- "ErrE" : Ortamın sıcaklığı cihazınızın çalışma özellikleri içinde değildir.
- "ErrU" : Ölçme düğmesine bastıktan sonra çalışmıyor ise uyarı verir: Kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayarak tekrar deneyiniz.
- "ErrH" : Cihazınız çalışır durumda iken hata vermiştir. Bu durumun düzelmesi için cihazınızın pilini çıkartıp 10 saniye sonra tekrar çalıştırınız.
- "ErrS" : Sensör bozulmuştur. Cihazınızı uygun olmayan ortamlarda ve sıcaklıklarda kullanmayınız.

- “ErrL” : Donanım problemi vardır. Yetkili servise başvurunuz.
- “ErrP” : Donanım problemi vardır. Yetkili servise başvurunuz.
-  : Düşük pil seviyesinden dolayı etkisizliği bildirir. Pili değiştiriniz.

GELİŞMİŞ GÖSTERGELER

Zaman Ayarlaması

- Başlama düğmesine (1) basarak cihazınızı çalıştırınız. Tarih göstergesi ekranda görünecektir.
- Ayarlama düğmesine (7) üç saniye basılı tutunuz. Saat göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayarlama düğmesine(7) basarak saat ayarını yapınız.
- OK düğmesine (6) basarak saat ayarını onayladıktan sonra dakika göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Aynı adımları dakika, yıl, ay ve gün için yapınız.
- Zaman ayarlamasını yaptıktan sonra uyku modu ayarlarını yapabilirsiniz.

Uyku Modu

Uyku modu kapalıyken ekran sürekli açık durumda olur. Oda sıcaklığı ve saat ekranda değişerek görünür:

- Ayarlama düğmesine (7) basarak uyku modunu açip veya kapatabilirsiniz (ON / OFF).
- OK düğmesine (6) basarak seçtiğiniz ayarı onaylayabilirsiniz.

Yemek ve Sıvı Isı Ölçümü

- Alından ısı ölçme başlığını (5) takınız.
- OK düğmesi (6) ve başlama düğmesine (1) aynı anda basınız. Ekranda "FOOD" yazısı görünecektir.
- Isısını ölçmek istediğiniz besine ya da biberona alından ısı ölçme başlığını 2cm uzaklıkta tutunuz ve başlama düğmesine (1) basınız.



UYARI: Alından ateş ölçer başlığını yemeklere dokundurmayınız.

- İki defa bip sesi duyduğunuz zaman ölçüm yapılmış demektir.

BAKIM ve TEMİZLİK

- Sondanın önünde yer alan sensör aşınış şeklinde hassas bir parçadır. Doğru ölçüm yapmak için, her zaman bunu temiz ve zarar görmemiş olarak tutunuz.

- Herhangi bir sıvının sensörün üzerine dökülmesini önlemek için sensörü alta bakacak şekilde yerleştiriniz. Sensörü alkolü pamuk çubuk kullanmak suretiyle dikkatli bir şekilde temizleyiniz. Temizleme işleminden sonra bir saat boyunca kullanmayınız.
- Ürünün dış tarafı yumuşak bezler kullanılarak temizlenmelidir.
- Ürünü doğrudan güneş ışığından, tozdan ve kirlenici maddelerden uzak tutunuz.
- Ürün normal oda sıcaklığı dışında yerleştirildiği zaman, ürünü 30 dakika boyunca normal oda sıcaklığında tuttuktan sonra kullanınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

Pil: Li, 3V DC

Bu ürün EC93 / 42 / EEC (Tibbi bölüm direktifleri) koşullarını onaylar:

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.





Attention: Read the operating Instructions for use!



Applied part of type B



Disposal in accordance with Directive 2002/96/EC (WEEE)



**Complies with MDD 93/42/EEC and amended by
directive 2007/47/EC requirements. Notified body
TUV SUD (0123)**



Üretici / İthalatçı:

.Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

.Made in P.R.C

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra, bu anızalann maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azamı süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gün geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

BEBBEAR 863 KULAKTAN
VE ALINDAN ATEŞ
ÖLÇER DİJİTAL
TERMOMETRE**ARZUM®****BEBBE**AR 863 KULAKTAN
VE ALINDAN ATEŞ
ÖLÇER DİJİTAL
TERMOMETRE**ARZUM®****GARANTİ BELGESİ**

BELGE NO: 86733

BELGE ONAY TARİHİ: 09/07/2010

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.ŞÜRÜNÜN CİNSİ : KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL
TERMOMETRE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BEBBE

TYPE NO : AR 863

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 86733

BELGE ONAY TARİHİ: 09/07/2010

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.ŞÜRÜNÜN CİNSİ : KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL
TERMOMETRE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BEBBE

TYPE NO : AR 863

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde gidenlememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

CE 0197